

medic spa
Baby

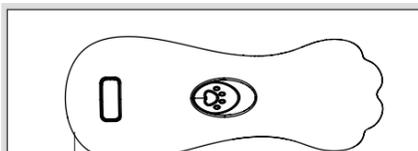
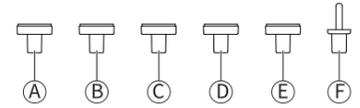
משייף ציפורניים חשמלי
לתינוק ולאם
מדריך למשתמש



Suitable for adults Suitable for adults Sand the edges
 Suitable for 0-3 years Suitable for 12 months Suitable for 4-11 months

MF
 יבואן: מ. פיינגרש ושות' בע"מ
 רח' דותן 2, יבנה, טל': 08-9999399
 המרכז למוצרים רפואיים ואורטופדיים

יש לקרוא בעיון את המדריך לפני השימוש.
אנו מקווים שתהיו מרוצים מהמוצר.

רכיבים ואביזרים (איור A)

1. מכשיר ראשי (ABS)
 - ראש שיוף A: ורוד לתינוקות בני 0-3 חודשים
 - ראש שיוף B: כחול לתינוקות בני 4-11 חודשים
 - ראש שיוף C: ירוק לתינוקות מגיל שנה ומעלה
 - ראש שיוף D: לבן מבוגרים (פוליש)
 - ראש שיוף E: כסף מבוגרים
 - ראש F: מוט שיוף..... לשייף קצוות

איך להשתמש

התקנת סוללות:

1. יש ללחוץ מטה כדי לפתוח את מכסה תא הסוללה.
2. יש להכניס סוללה אחת מסוג AA לפי הקוטביות "+".
3. יש להחזיר את מכסה הסוללה.

החלפה והתקנת ראש שיוף:

- וודאו תחילה שהמכשיר כבוי.
- החליפו לראש השיוף הרצוי (ראה "רכיבים ואביזרים").
- ודאו שההתקנה מהודקת.
- יש להחזיק בעדינות את יד התינוק ובחר את מהירות השיוף המתאימה.
- לתוצאות טובות יותר, יש להימנע משימוש כשהידיים או הרגליים רטובות.
- הימנעו משיוף מרכז הציפורן.
- אין צורך בלחץ חזק - מגע עדין מספיק.

ניקוי ואחסון

1. אין לפרק את המכשיר לשם ניקוי - ניתן לנגב עם מגבת או בד רך ולח מעט.
2. אין להשתמש באלכוהול, אצטון, בנזין או חומרים קורוזיביים.
3. אם לא משתמשים לאורך זמן - יש להוציא את הסוללה.
4. לאחסן במקום קריר ויבש.

פרטי המוצר

שם המוצר	משייף ציפורניים חשמלי
דגם	UB-001
סוג סוללה	AA/R6/5#
מתח כניסה	V1.5
הספק כניסה מדורג	W0.6
תקנים	GB4706.1-2005