



# מדיק'ג'יט אולטראסוניק

## מנקה ומסיר אבנית



**יבואן: מ. פיינגרש ושות' בע"מ**  
רח' דותן 2 יבנה טל: 08-9999399  
מרכז למוצרים רפואיים ואורטופדיים  
Since 1968

תודה שבחרת לרכוש את מכשיר המדיק'ג'יט האולטראסוניק של מדיק ספא לפני התחלת שימוש במוצר, יש להקפיד ולקרוא מדריך זה ולהבין את התוכן במלואו למען בטיחות. מוצר זה מיועד לשימוש ביתי בלבד. המכשיר נועד להסיר פלאק ואת האבנית העיקשת והקשה מהשיניים ויעזור לכם להשיג שיניים לבנות יותר, חניכיים וחלל פה בריאים יותר בעזרת טיפול עצמאי של כמה דקות מהבית. יש לקרוא מדריך זה בעיון לפני השימוש במוצר.


### כיצד להשתמש במוצר בבטחה

אין להשתמש במכשיר למטרות אחרות פרט למטרה שלה הוא מיועד. יש להפסיק את השימוש במכשיר במידה והמכשיר לא תקין. מוצר זה אינו צעצוע, יש להמנע משימוש ישיר על ידי ילדים או חולים עם קוצבי לב. יש להשתמש בזריזות בחולים עם מחלות לב, נשים בהריון וילדים. נא לא למקם את המוצר ישירות באור השמש, יש לאחסן אותו בסביבה פנימית של 10 עד 40 מעלות. נא לא לפרק, לפתוח או לנסות לתקן את המוצר לבד. במקרה של בעיות באיכות המוצר, יש לפנות לשירות הלקוחות של חברתנו.

### לשים לב

כאשר ראש הניקוי המתכתי נוגע בשיניים, הוא פולט זמזום, שזה מצב עבודה רגיל. אם אתם סובלים ממחלת חניכיים, אנא התייעצו עם רופא השיניים שלכם לפני השימוש. דימום החניכיים עלול להתרחש גם במקרה של חניכיים בריאים. אם דימום החניכיים נמשך, ייתכן שהוא נובע מפגמים בחניכיים, כגון מחלת חניכיים, יש להפסיק את השימוש ולהתייעץ עם רופא השיניים. במהלך ניקוי השיניים, ראש הנקוי לא צריך להישאר על פני השטח של השן במשך זמן רב. כדי להסיר אבנית עקשנית וכתמי שיניים, יש לגרד עם ראש הניקוי את השיניים בזווית של 45°. לאחר הפעלת המכשיר, בדרך כלל אין רעש של צליל גבוה, במידה ונשמע צליל גבוה, זה תקין.

### חלקי המכשיר

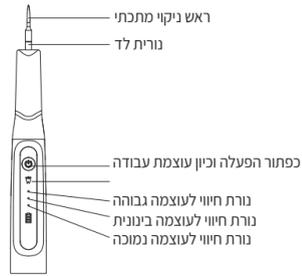


### כיצד להפעיל את המכשיר



- יש לוודא שמד'ג'יט אולטראסוניק מוטען במלואו לשימוש.
- יש ללחוץ לחיצה ארוכה על כפתור ההפעלה ולוודא שנורת החיוו בעוצמה נמוכה נדלקת. לחיצה קצרה שוב על מתג ההפעלה והמכשיר יעבור לעוצמה בינונית ולחיצה קצרה נוספת תעביר את המכשיר לעוצמה גבוהה. מומלץ להשתמש תחילה במצב של עוצמה נמוכה ולאחר ההסתגלות ניתן להגביר את העוצמה. סוג המצב: (1) חלש (2) בינוני (3) עוצמתי
- יש לבחור ראש ניקוי מתכתי ולחברו למכשיר ע"י סיבוב עם כיוון השעון. אין לסובב את ראש הניקוי בעוצמה כדי לא לפגוע במכשיר לאחר בחירת העוצמה המתאימה, כשראש הניקוי המתכתי מכוון לשיניים, ניתן להתחיל להסיר אבנית / פלאק על ידי רטט. יש לנקות תוך שימוש במעט כוח כדי לגרד ולהסיר את האבנית מהשיניים, נסה עוד כמה פעמים. כי אבני השן קצת עקשניות. היו סבלניים יותר, וזה יהיה קל לתפעול כאשר אתם שולטים בשיטה.
- בתום השימוש במכשיר, יש ללחוץ לחיצה ארוכה על כפתור ההפעלה עד שהמכשיר נכבה.

### כיצד להשתמש בראש הניקוי המתכתי

יש לנקות בעזרת ראש הניקוי המתכתי בעדינות את השיניים באופן אנכי למעלה ולמטה, בנוסף רצוי לנקות באופן אופקי. יש להתאים את זמן השימוש לכל חלק של השן בהתאם למצב השיניים

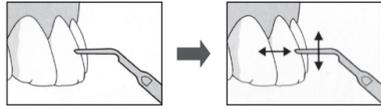

אין לנקות את השיניים במידה ואין כתמים או אבנית

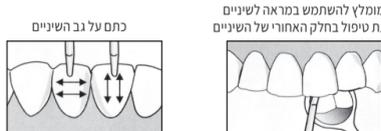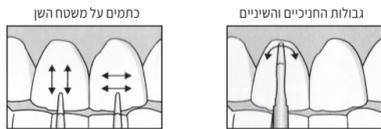

### כיצד לתחזק

כאשר המכשיר אינו בשימוש במשך זמן רב, יש לשמור אותו במקום יבש. אין לשתף את הגוף ואת מתאם המתח במים. אין להשתמש במדלל, בנזן וממיסים כגון נפט, אבקת קרצוף כדי לנקות את המכשיר.




### פרמטר מוצר

שם המוצר	מכשיר אולטראסוניק להסרת אבנית
מחח טעינה	5V ---1A
סוללה	500mA
עוצמה מדורגת	1.5 ואט
תדירות	37 קילו-הרץ/+-3-- קילו-הרץ

### כיצד לשנות את ראש הניקוי המתכתי

הכיוון של ראש הניקוי המתכתי יכול להשתנות, כל עוד הוא מותקן היטב על הידית ניתן להשתמש בו לכל כיוון.

אם החיבור רופף, המכשיר לא יפעל כראוי, לכן יש לוודא שראש הניקוי המתכתי מחובר היטב, ניתן להשתמש בערכת במפתח להידוק ראשי הניקוי כדי לחבר את ראש הניקוי המתכתי. אין להשתמש בכלים אחרים כדי לפרק המכשיר, זה עלול לגרום לנזק למכשיר.

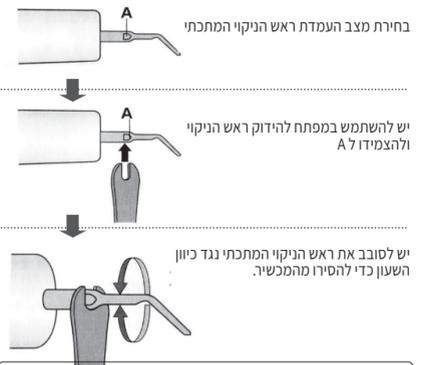

אמצעי מניעה  
במידה וראש הניקוי המתכתי יורכב באופן הדוק במיוחד, המכשיר יכול להינזק.